

KaVo MASTERtorque™ Turbin med Direct Stop Technology


# Starkare. Tystare. Bekvämare.

**NYHET**

KaVo MASTERtorque™  
Turbin med Direct Stop Technology

KaVo *Master Series*

Med perfektion och påtaglig känsla för kvalitet.

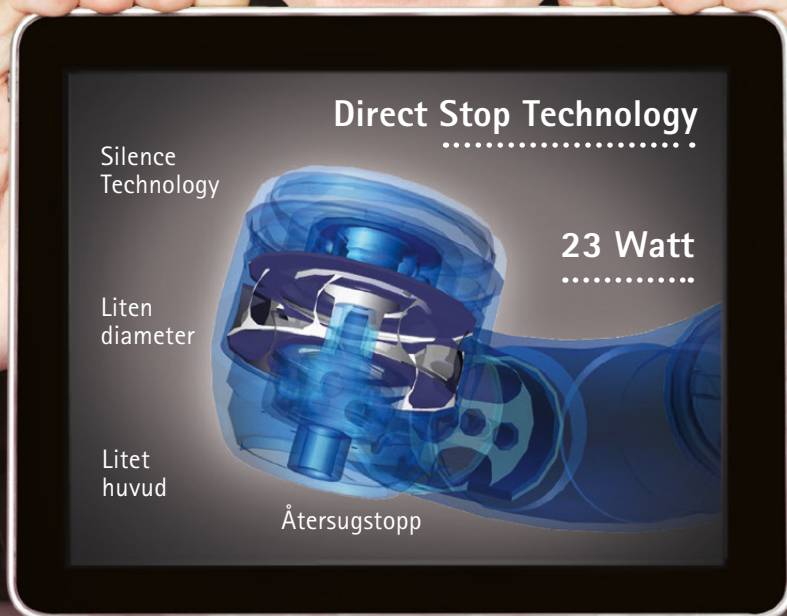

KaVo. Dental Excellence.

## Starkare.

KaVo MASTERtorque – upplev en helt ny dimension av prestanda på 23 watt. Bästa förutsättningarna för att kunna preparera säkert och effektivt.

- **Mer effekt**  
23 watt oslagbar prestanda ger ca 20 % högre effekt.
- **Högre precision**  
Stabilt varvtal och hög effekt.
- **Bästa komfort**  
Effektiv och exakt preparering även vid lätt arbetstryck.

\* Jämförelse med turbin KaVo GENTLEsilence 8000 B.

Högsta möjliga prestanda:

**23 Watt**


för ett stabilt arbetsvarvtal

## Tystare.

Den nya KaVo MASTERtorque kombinerar beprövad Silence Technology med utökad frekvensoptimering. Bästa förutsättningar för att preparera utan högt ljud.

- **Mindre driftljud**  
Effektiv frekvensoptimering skapar ett behagligt turbinljud och ger en låg ljudnivå på bara 57 dB(A).

### Ljudjämförelse

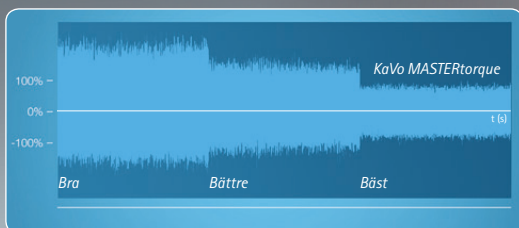

Ljudjämförelse av KaVo MASTERtorque med andra turbiner



Månaders  
garanti

MASTERtorque  
COLOR

# Arbeta säkert och bekvämt – med Direct Stop Technology.

Snabbare stopp – för din säkerhet. Den nya Direct Stop Technology (DST) minskar stopptiden på KaVo MASTERtorque med


\*\* i medelvärde

## Preparera säkert

Innovativ Direct Stop Technology stoppar borret på en sekund\*\* och skapar på så vis större säkerhet i behandlingen.


ca 60 % och stannar på bara en sekund. Ger de bästa förutsättningarna att arbeta både säkert och bekvämt.

## Borrets stopptid

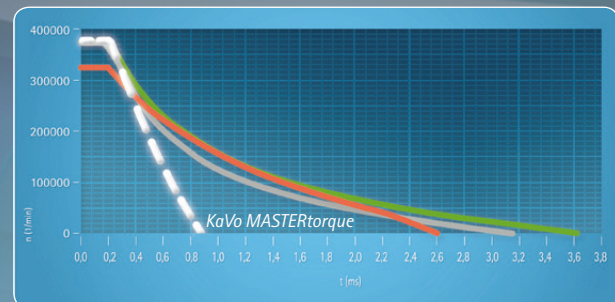

Stoptid i jämförelse med andra turbiner.

## Återsug vid huvudet

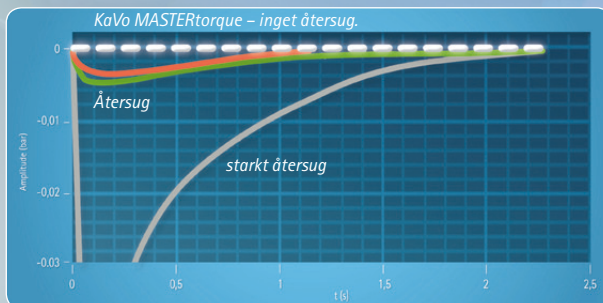

Återsugstopp och undertryck vid huvudet.

## Säker hygien

Mycket kort stopptid förhindrar att aerosoler sugas tillbaka och att partiklar sugas in i turbinhuvudet, vilket är förutsättningar för säker hygien och lång livslängd.

## Arbeta snabbare och effektivare med större säkerhet


DST gör det möjligt att fortsätta arbeta direkt efter att du gjort en paus med borren, t.ex. efter preparationskontrollen eller när du byter borrhjul.



KaVo. Dental Excellence.

## Mycket god sikt.

Den kompakta och ergonomiska konstruktionen på KaVo MASTERtorque och det unika belysningskonceptet från KaVo skapar bästa arbets- och siktförhållandet vid preparationsområdet.

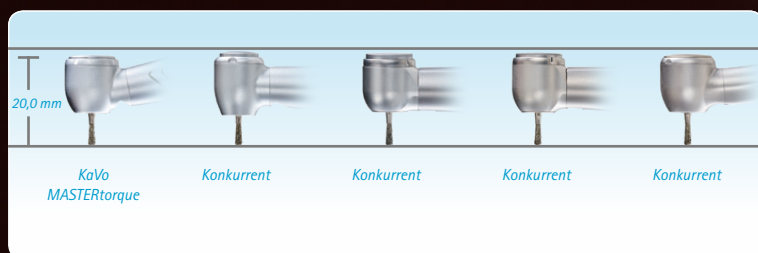

Huvudstorlek i jämförelse med andra tillverkare.

### Se mer

- Minskad diameter på huvudet mot borret  
En huvudhöjd på bara 13,1 mm – vid 19 mm borrar, bara 20 mm totalhöjd.
- Med patenterad KaVo 100°/19° huvud-/knäinkelkombination.

### Mer ljus

- Preparationsområdet är alltid perfekt upplyst.
- Mycket god sikt till preparationsområdet i sprayläge; ljus- och spraymynningar sitter optimerade mot varandra.



Bästa möjliga sikt med spray och ljus optimerade mot varandra.

### Mer än bara en turbin

Genom kombinationen av 20 % högre effekt, lägre vikt och den innovativa Direct Stop Safety Technology är KaVo MASTERtorque ett alternativ till uppväxlade vinkelstycken.



Tillfälliga kulörer  
antracit och brun



KaVo. Dental Excellence.